

## غربالگری فاکتورهای پیش‌آگهی دهنده با استفاده از تکنیک Multiplex RT-PCR در رده‌های مختلف سلول‌های لوسمی

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۷/۰۵/۲۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۷/۰۹/۳۰

### چکیده

زمینه و هدف: لوسمی یکی از شایع‌ترین انواع سرطان در کودکان می‌باشد. لوسمی حاد لنفوسیتی T حدود ۱۵٪ زمینه را در بر می‌گیرد. شناسایی تغییرات ژنتیکی مرتبط با لوسمی با توجه به پیشرفت‌های گسترده در زمینه سیتوژنتیک مولکولی و نیز به کارگیری تکنیک‌های ژنتیکی مولکولی بهبود یافته است. تعیین این تغییرات ژنتیکی می‌تواند پیشگویی کننده دقیق نتایج بالینی باشد. این ملاحظات بر نیاز اساسی برای به کارگیری یک روش شناسایی سریع تغییرات ژنتیکی در این ناهنجاری‌ها تأکید می‌کنند. روش بررسی: در این مطالعه سیستم (RT-PCR) Reverse Transcription برای غربالگری سه فاکتور رونویسی سرطان‌زا با نام‌های TLX3/HOX11L2، TLX1/HOX11، TAL1/SCL که در لوسمی لنفوبلاستیک نوع T بسیار مهم می‌باشند، به کار گرفته شده است. یافته‌ها: با استفاده از تکنیک Multiplex RT-PCR در نمونه‌ای که حاوی مجموعه‌ای از cDNA سه رده سلولی Peer, HPB-ALL و K562 می‌باشد، شناسایی همزمان سه انکوژن L2، TLX3/HOX11L2، TLX1/HOX11 و SCL، که به ترتیب در رده‌های سلولی فوق بیان می‌شوند، صورت گرفت. نتیجه‌گیری: روش Multiplex RT-PCR را می‌توان به عنوان ابزار مهمی برای کامل کردن روش‌های سیتوژنتیک در غربالگری بیماران مبتلا به لوسمی حاد نوع T باشد و خصوصیات سلول‌های لوسمیک را با سرعت و کارایی بالایی و نیز هزینه‌ای بسیار کمتر تعیین نماید. برای این آزمایش نیازی به نمونه مغز استخوان نیست و از خون محیطی می‌توان استفاده کرد و روند پیشرفت درمان را با بررسی خون محیطی از نظر بیان این انکوژن‌ها بررسی کرد. علاوه بر این به متخصصین مربوطه این امکان را می‌دهد که نه تنها در حداقل زمان ممکن از وضعیت درمان آگاهی یابد بلکه عوارض جانبی را با به کارگیری درمان مناسب کاهش دهد.

کلمات کلیدی: Multiplex RT-PCR, انکوژن، لوسمی، سلول.

روشنک آهنی  
پوپک درخشندۀ پیکر  
رضا رئوفیان  
نصرور حیدری\*

گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

\*نویسنده مسئول: تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس،  
خیابان پورسینا  
تلفن: ۸۸۹۵۳۰۰  
email: mheidari@sina.tums.ac.ir

### مقدمه

شدیدی به همراه دارد. شایع‌ترین اهداف جایه‌جایی‌های کروموزومی در ALL، ژن‌های کدکننده فاکتورهای رونویسی از قبیل TLX1/HOX11، TLX1/SCL و TLX3/HOX11L2 هستند. این فاکتورهای رونویسی دارای دو عملکرد طبیعی و غیر طبیعی می‌باشند. برای مثال مطالعات مشخص نموده‌اند که عملکرد طبیعی TAL1/SCL و TLX1/HOX11 به ترتیب در شکل‌گیری و نمو طحال و در نمو و تمایز گویی‌چه‌های خون دخالت دارند.<sup>۱,۲</sup> به نظر می‌رسد که بیان غیرطبیعی خون دخالت دارند.<sup>۳,۴</sup> این رغم این واقعیت که TLX1/HOX11 یکی از شایع‌ترین انکوژن‌های فعل شده در T-ALL می‌باشد، TLX3/HOX11L2 که یک عضو از خانواده

لوسمی‌ها (Leukemia) حدود ۳۰٪ از سرطان‌های کودکان را تشکیل می‌دهند. ۱۵٪ لوسمی‌ها، لوسمی حاد لمفوبلاستی Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) می‌باشد. لوسمی‌های لنفوبلاستی حاد عمدتاً از نوع سلول T (T-ALL) است.<sup>۱</sup> با پیشرفت‌های صورت گرفته در روش‌های درمانی، توجه بیشتری نسبت به شناسایی مارکرهای پیش‌آگهی دهنده برای طبقه‌بندی بهتر بیماران صورت گرفته است.<sup>۲</sup> اگرچه بهترین نرخ بهبودی بیماران مبتلا به سرطان تا ۷۵ درصد مربوط به ALL بوده است اما نسبت بالایی از موارد آن هنوز کشته هستند.<sup>۳</sup> علاوه بر این، روش‌های درمانی کنونی از قبیل شیمی‌درمانی عوارض ناخواسته و در برخی موارد عوارض جانبی

کردن هموژنیزه شد. سپس تیوب به مدت ۱۵ ثانیه به شدت تکان داده و به مدت پنج دقیقه در دمای اتاق انکوبه شد. پس از اضافه کردن ۲۰۰۰ug کلروفرم، در دمای اتاق انکوبه و سپس در ۱۲۰۰۰xg ۱۵ دقیقه در دمای ۴۰°C سانتریفیوژ گردیدند. در این مرحله سه فاز تشکیل شده و فاز مایع رویی که حاوی RNA است به یک میکروتیوب جدید منتقل گردید. به منظور رسوب دادن ۵۰۰ RNA میکروولیتر ایزوپریوانول اضافه کرده و نمونه به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد. بعد از سانتریفیوژ با دور ۱۲۰۰۰xg ۱۰ دقیقه در دمای ۴۰°C سانتریفیوژ می نماییم. به مایع رویی ۱ml ۱اتانول ۷۵٪ اضافه نموده و در ۷۵۰xg سانتریفیوژ شد. در نهایت آن RNA حاصله در DEPC treated RNase free water حل گردید و به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۵۵°C قرار داده شد. RNA استخراج شده را به وسیله اسپکتروفتومتر از نظر کمی اندازه گیری و در ۷۰°C -تا زمان استفاده نگهداری شد.

برای ساختن cDNA ۱۱μl از آب دوبار تقطیر، ۱۰μl مهارکننده ریبونوکلئاز و ۵mM dNTP به مدت ۱۵ دقیقه در ۳۷°C انکوبه شدند، سپس ۲۰۰ RT-PCR Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase (Fermentas Litvania) (MMLV RT) واحد آنزیم محلول حاصل به مدت ۶۰ دقیقه در ۴۲ درجه انکوبه و در نهایت ۱۰ دقیقه در ۷۰°C و cDNA تا زمان مورد نیاز در ۷۰- قرار داده شد.

کنترل کردن cDNA برای تایید کیفیت: برای چک کردن تمامیت و صحت cDNA ساخته شده از پرایمرهای ژن خانه‌دار Phosphoglucomutase 1 (PGM1) (Housekeeping) استفاده شد. پرایمرهای این ژن ناحیه ۱۷۱۸ تا ۲۱۰۴ (از آگرون شماره ۱۰ تا آگرون شماره ۱۱) PGM1 را تحت پوشش قرار می‌دهند. تمام پرایمرهای مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار تحت وب Primer3 طراحی شدند و برای اختصاصی بودن در مورد اهدافشان به وسیله برنامه Blast چک شدند. این پرایمرهای گونه‌ای انتخاب شدند که شرایط تقریباً یکسانی برای Multiplex RT-PCR را فراهم آورند. از جمله می‌توان به  $T_m$  (Melting Temperature) تقریباً یکسان آنها اشاره کرد. جدول ۱ خصوصیات پرایمرهای را نشان می‌دهد قبل از اینکه این پرایمرهای برای Multiplex RT-PCR مورد استفاده قرار گیرند، ابتدا جفت پرایمرهای اختصاصی انکوژن‌های مورد مطالعه در واکنش PCR م Genius، با بهکارگیری نمونه cDNA از سلول‌های که

TLX1/HOX11 است، در ۳۰ درصد موارد T-ALL در کودکان بیان می‌شود که می‌تواند ناشی از جایه‌جایی کروموزومی (q35;q32) یا (q35;q32) باشد.<sup>۶۸</sup> تکنیک‌های سیتوژنتیک و فعال شدن ژن از نظر رونویسی باشد.<sup>۶۹</sup> تکنیک‌های مولکولی مانند Fluorescent In Situ Hybridization (FISH) نه تنها بسیار گران هستند بلکه در برخی موارد قادر به شناسایی جایه‌جایی کروموزومی (q35;q32) یا (q35;q32) نمی‌باشند. مطالعات نشان داده‌اند که فعال شدن انکوپروتئین‌هایی مانند TLX3/HOX11L2 و TLX1/HOX11 زیر رده‌های متفاوت T-ALL را مشخص می‌کنند و نقش پیش‌آگهی-دهنده در کودکان دارند.<sup>۹</sup> در حال حاضر تشخیص لوسمی حد از طریق به کار گیری علوم مختلف مانند بافت‌شناسی، ایمونولوژی و سیتوژنتیک به عنوان روش‌هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، انجام می‌یابد. ایمونوفوتیپ و بافت‌شناسی نمی‌توانند به عنوان ابزارهایی برای مشخص کردن پیش‌آگهی در بیماران به کار روند. در حالی که بررسی سیتوژنتیک بیماران لوسمیک می‌تواند در مواردی پیش‌آگهی‌های خاصی را مشخص کند<sup>۱۰</sup> در این مقاله راهنمایی یک سیستم RT-PCR Multiplex توصیف شده است. این روش، شناسایی TLX3/HOX11L2، TLX1/HOX11 و TAL1/SCL را به صورت اختصاصی در رده‌های سلولی لوسمیک Peer, PB-ALL و K562 بیان می‌شوند، را آسان‌تر می‌نماید.

روش بررسی

این مطالعه از نوع علوم پایه (Experimental) بوده و در گروه ژنتیک پژوهشی دانشکده پژوهشی انجام گردیده است.

رده‌های سلولی و کشت سلول: رده‌های سلولی لوسمیک HPB-ALL و K562 از انسیتوپاستور ایران خریداری شدند و در محیط Peer کشت RPMI 1640 که با ده درصد سرم جنین گاوی (FBS) و ۰/۰۳ درصد LGlutamin (Roche-Germany) و یک درصد پنی‌سیلین/ استرپتومایسین (Roche-Germany) تکمیل شده بود در دمای  $37^{\circ}\text{C}$  و  $\text{CO}_2$  بینج در صد کشت داده شدند.

استخراج RNA تام سلول‌ها با استفاده از Tripure (Roche, Germany) استخراج شد. به صورت خلاصه ابتدا سلول‌های کشت داده شده توسط لام نویار شمارش گردیدند. تعداد پنج میلیون از سلول‌ها به مدت ۲۰ ثانیه در ۱۳۰۰۰ rpm سانتریفیوژ و مایع رویی دور ریخته شد. Tripure به رسوب سلولی، اضافه و به سیله بیست ۱ ml از

TLX1/HOX11 ۱۸۰bp) برای راند اول و ۱۴۹bp (برای راند دوم) از TLX1/HOX11 انسانی بهوسیله RT-PCR Semi-nested با استفاده از peer مربوط به رده لوسمیک انجام شد. شکل ۱ محصولات cDNA مربوط به این RT-PCR را نشان می‌دهد. cDNA مربوط به ژن TLX1/HOX11 قبلاً در وکتور باکتریایی pGEX-6p-1 کلون شده بود. غربالگری رده سلولی HPB-ALL برای بیان ژن TLX3/HOX11L2: قسمت‌هایی از ناحیه کد کننده TLX3/HOX11L2 شامل ۳۲۸bp در راند اول و ۱۴۹bp در راند دوم از این ژن تکثیر یافته و شکل ۲ نتایج حاصل از Semi-nested Multiplex RT-PCR را نشان می‌دهد. محصول PCR راند دو در یک وکتور TA-cloning کلون گردید. شکل ۲ نتیجه PCR تکی را که با استفاده از وکتور نوترکیب به عنوان الگو به کار رفته است را نشان می‌دهد. ما نتایج PCR هایی را که در آنها الگوی PCR از RNA تام رده سلولی مربوطه بوده را با وکتور نوترکیب حاوی TLX1/HOX11 و TLX3/HOX11L2 در شکل ۲ با یکدیگر مقایسه کردایم. هدف اصلی از این آزمایش، ساختن یک کنترل مثبت به جای استفاده از رده سلولی مربوطه برای مطالعات بیشتر از جمله به کار بردن این کلون در هنگامی که محقق سعی در انجام RT-PCR و یا Multiplex RT-PCR بر روی نمونه‌های بالینی دارد، می‌پاشد.

غربالگری برای بیان ژن TAL1/SCL: با تکنیک Semi-nested RT-PCR دو قطعه ۲۵۴bp و ۱۶۹bp و رده سلولی K562 تکثیر شدند. شکل ۳ موقعیت باندهای PCR را برای هر دور تکثیر نشان می‌دهد. محصول PCR راند دوم در یک وکتور TA-cloning کلون گردید. غربالگری RT-PCR با استفاده از TAL1/SCL و TLX3/HOX11L2 با انجام Multiplex RT-PCR از این آزمایش برای شناسایی سه فاکتور رونویسی سرطان‌زای ذکر شده، سه جفت پرایمر طراحی

آنها را بیان می‌کردند، آزمایش شدند. این آزمایش به Split out RT-PCR معروف است. برای هر جفت پرایمر گرادینت RT-PCR دمایی انجام شد که در نهایت منجر به انتخاب بهترین  $T_m$  مشترک برای هر سه پرایمر گردید. از سوی دیگر بیشترین زمان مورد استفاده برای تکثیر طولانی ترین Amplicon به عنوان زمان Extension در واکنش Multiplex RT-PCR انتخاب گردید. طبق برنامه‌زیر انجام شد: چرخه‌های حرارتی  $95^{\circ}\text{C}$  ۹۵ به پنج دقیقه یک سیکل،  $95^{\circ}\text{C}$  ۹۵ درجه سانتی‌گراد ۳۰ ثانیه،  $58^{\circ}\text{C}$  به مدت ۳۰ ثانیه و  $72^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد ۴۰ ثانیه و طی ۳۰ سیکل PCR و پلیمریزاسیون نهایی هفت دقیقه.


TA Cloning: ژن‌های TLX3/HOX11L2 و TAL1/SCL بعد از تکثیر به روش RT-PCR و خالص‌سازی از ژل آگاروز با استفاده از کیت (Fermentas, Litvania) TA-Cloning

## یافته‌ها

برای انجام این پروژه سلولهای مورد مطالعه طبق توضیحاتی که در بخش مواد و روش‌ها ذکر گردید RNA تام استخراج گردید. شکل ۱ نمایش Total RNA استخراج شده را نشان می‌دهند. همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود بعد از ساخت cDNA کیفیت و صحت آن بهوسیله پرایمرهای خاص ژن PGM بهوسیله RT-PCR آزمایش گردید. غربالگری رده‌های سلولی لوسمیک برای بیان ژن‌های TLX1/HOX11 و TLX3/HOX11L2 مشخص شده است که بیان این سه انکوژن باعث پیشرفت ALL می‌شود پس ما ابتدا بیان این ژن‌ها را بهوسیله RT-PCR و سپس بهوسیله Multiplex RT-PCR بررسی کردیم. غربالگری رده سلولی Peer برای بیان ژن TLX1/HOX11: شرایط برای تشخیص TLX1/HOX11 بهینه شد و قسمتی از ناحیه کد کننده


جدول-۱: ترداد پرایمرهای مورد استفاده در Multiplex RT-PCR

پرایمر	فاکتور ترانسکریپشن انکوژنی	پرایمرهای راند اول	پرایمرهای راند دوم
TLX3F	TLX3/HOX11L2	5'-CAGTGTGAACCTGAGCCTAGC-3'	5'-CAGTGTGAACCTGAGCCTAGC-3'
TLX3R1		5'-CGTGCAGCGCTTTCCA-3'	5'-CGTGCAGCGCTTTCCA-3'
TLX3R2		5'-CATGGTCAGCTGAGTCCT-3'	5'-CATGGTCAGCTGAGTCCT-3'
TAL1F	TAL1/SCL	5'-GGGAAGGTCCTCTTAC-3'	5'-GGGAAGGTCCTCTTAC-3'
TAL1R1		5'-CCGGCTGTTGGTAAGATAC-3'	5'-CCGGCTGTTGGTAAGATAC-3'
TAL1R2		5'-TCCCCGGATGGAGAGAAC-3'	5'-TCCCCGGATGGAGAGAAC-3'
HOF	TLX1/HOX11	5'-AGGTACTTCTGGCGGTGGA-3'	5'-AGGTACTTCTGGCGGTGGA-3'
HOR1		5'-GCCCGCAGGTCCTCTTCCCTCAC-3'	5'-GCCCGCAGGTCCTCTTCCCTCAC-3'
HOR2		5'-TCCGACTGAGCGGACTGGGAGTG-3'	5'-TCCGACTGAGCGGACTGGGAGTG-3'
PGMF	PGM1		
PGMR			

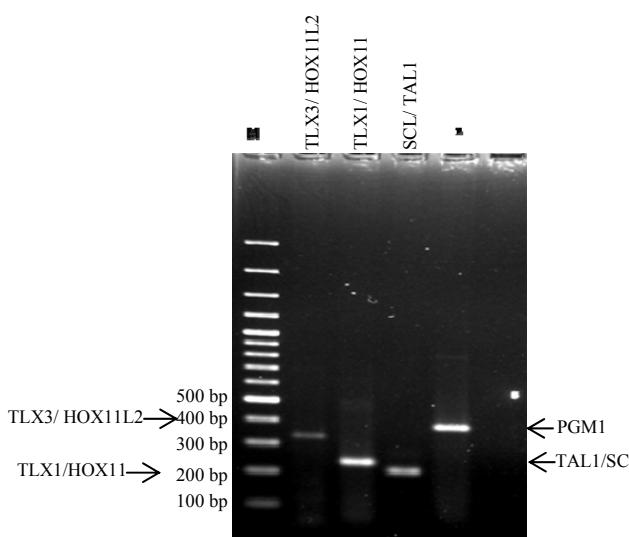


شکل-۳: Split out RT-PCR. ژل آگارز (۲٪) رنگ آمیزی شده توسط اتیدیوم


بروماید نشان دهنده تکثیر TLX3/HOX11L2 و TLX1/HOX11، TAL1/SCL و HBP-ALL انسانی که به ترتیب از روی cDNA بدست آمده از رده‌های سلولی Peer و K562 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی را نشان می‌دهد. ردیف اول نشان دهنده مارکر DNA 100bp. ردیف‌های ۲، ۳، و ۴ به ترتیب نشان دهنده TLX1/HOX11 (180)، TAL1/SCL(254bp) TLX3/HOX11L2 (۳۶۸) از Split out می‌باشدند. ردیف ۵ نشان دهنده کنترل مثبت و ردیف ۶ کنترل منفی آزمایش می‌باشدند.

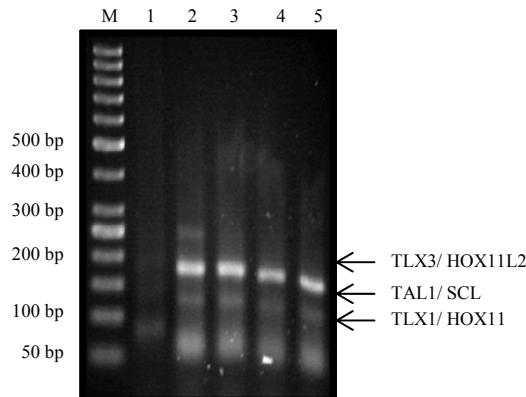

شکل-۴: نتایج نسایج Semi- Nested Multiplex RT-PCR برای تشخیص همزمان انکوژن‌های TLX1/HOX11، TLX3/HOX11L2 و TAL1/SCL. ژل آگارز (۲٪). رنگ آمیزی شده توسط اتیدیوم برromاید نشان دهنده محصولات Semi-Nested Multiplex RT-PCR حاصل از تکثیر همزمان مرحله دوم آنکوژن‌های (169bp) TLX3/HOX11L2 (254bp) و TLX1/HOX11 (149bp)، TAL1/SCL انسانی به ترتیب بدست آمده از روی cDNA مخلوط مساوی از رده‌های سلولی Peer و K562 با پرایمرهای اختصاصی است. ردیف اول نشان دهنده مارکر 50bp DNA، ردیف اول نشان دهنده کنترل منفی و ردیف‌های ۲، ۳، و ۴ به ترتیب مرحله دوم Semi-Nested Multiplex RT-PCR با غلط‌های مختلف پرایمرهای اختصاصی شامل غلظت‌های 10pM، 12pM، 5pM و 2.5pM را نشان می‌دهند.

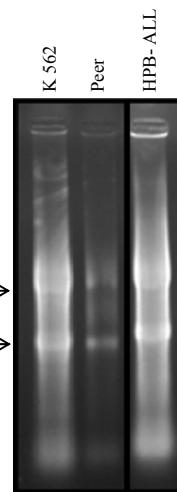

شکل-۱: نمایش Total RNA استخراج شده بر روی ژل ۱/۲٪ رنگ آمیزی با اتیدیوم بر ماید. آگارز رنگ آمیزی با اتیدیوم بر ماید. فلش‌ها به ترتیب موقعیت -RNA های ریبوزومی را نشان می‌دهند

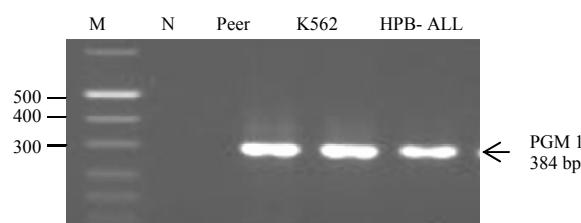

شکل-۲: ژل آگارز ۱/۲٪ رنگ آمیزی شده با اتیدیوم برromاید نشان دهنده محصولات RT-PCR برای تعیین کیفیت cDNA. از چپ به راست اولین ردیف مربوط به مارکر ۱۰۰ DNA جفت بازی است. محصولات RT-PCR مربوط به PGM چهار رده سلولی peer و K562 و HPB-ALL را نشان داده است. باندهای مربوط به اندازه قطعه DNA تکثیر یافته PGM نشان داده شده‌اند.

شد که دمای هم سرشته‌سازی آنها تقریباً مساوی بود و در عین حال Amplicon هایی با طول‌های متفاوت ایجاد می‌کردند. محصولات PCR با اندازه متفاوت‌شان بر روی ژل آگارز قابل تشخیص بودند (شکل ۴).

## بحث

شناسایی جایه‌جایی‌های کروموزومی خاص یک ابزار کلیدی برای تشخیص و طبقه‌بندی کردن ریسک و پروگنوز در کودکان مبتلا به T-ALL است. روش‌های درمانی کنونی از روش‌های مختلف با شدت های متفاوت بر اساس گروه ریسک، به بهبود نرخ زندگی بچه‌های مبتلا به T-ALL تا حدود ۸۰٪ در برخی از مراکز کمک کرده‌اند.<sup>۱۱</sup> نتایجی که در این مقاله ارائه شده‌اند، توصیف‌کننده تلاش‌های ما برای بهینه‌سازی یک سیستم تحلیلی Semi-nested Multiplex RT-PCR

هدف آنها مشخص کردن بازآرایی‌های ژن‌های Ig و TCR به عنوان مارکر کلونال و تشخیص Minimal Residual Disease (MRD) بود.<sup>۱۶</sup> برای انجام Semi-nested multiplex RT-PCR جهت تعیین فاکتورهای رونویسی کننده TAL1/SCL، TLX1/HOX11، TLX3/HOX11L2 و سه جفت پرایمر اختصاصی با دماهای هم سرشته‌سازی تقریباً مساوی و طول متفاوت Multiplex RT-PCR، طراحی شدند. Multiplex RT-PCR از ارزشمندترین روش‌ها برای غربالگری تعداد زیادی از بیماران مبتلا به ALL به صورت همزمان است. برای تایید انجام شدن Multiplex RT-PCR و بررسی روش تشخیص از نظر صحت، نیاز به کنترل‌های مثبت و منفی می‌باشد. در این بررسی ماسه انکوژن را که مکرراً در T-ALL بیان می‌شوند، با استفاده از رده‌های سلولی لوسیمیک که به صورت اختصاصی این ماسه انکوژن را بیان (overexpress) می‌نمایند کلون کردیم. ما یک Multiplex RT-PCR را با استفاده از یک cocktail از سه حامل حاصله که دارای قطعاتی از cDNA ژن‌های TLX1/HOX11 و TAL1/SCL و TLX3/HOX11L2 با استفاده از نمونه‌های بالینی می‌تواند متفاوت از Multiplex PCR با استفاده از سیستم cocktail باشد، استفاده از این Multiplex PCR با استفاده از سیستم می‌باشد برای محققینی که مایل به حامل‌ها می‌توانند کنترل مثبت مناسبی باشند. بر اساس تحقیقات ما، نتایجی که در استفاده از این سیستم هستند. بر اساس تحقیقات ما، نتایجی که در این مقاله ارائه شده‌اند، اولین گزارشی هستند که سه فاکتور پیش‌آگهی-دهنده مهم را در کودکان مبتلا به T-ALL با روش Semi-nested Multiplex RT-PCR شناسایی می‌کنند. RT-PCR برای شناسایی هر کد کننده فاکتور رونویسی انکوژن در ALL وقت‌گیر، وابسته به مواد و تقریباً امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر مطمئن‌ترین و تکرار‌شونده‌ترین تکنیک برای تشخیص آسان و کم‌هزینه و سریع در بیماران سرطانی می‌باشد.

## References

1. Parkin DM, Stiller CA, Draper GJ, Bieber CA. The international incidence of childhood cancer. *Int J Cancer* 1988; 42: 511-20.
2. Gottardo NG, Jacoby PA, Sather HN, Reaman GH, Baker DL, Kees UR. Significance of HOX11L2/TLX3 expression in children with T-cell acute lymphoblastic leukemia treated on Children's Cancer Group protocols. *Leukemia* 2005; 19: 1705-8.
3. Greaves M. Childhood leukaemia. *BMJ* 2002; 324: 283-7.
4. Roberts CW, Shutter JR, Korsmeyer SJ. Hox11 controls the genesis of the spleen. *Nature* 1994; 368: 747-9.
5. Dear TN, Colledge WH, Carlton MB, Lavenir I, Larson T, Smith AJ, et al. The Hox11 gene is essential for cell survival during spleen development. *Development* 1995; 121: 2909-15.
6. Salvati PD, Ranford PR, Ford J, Kees UR. HOX11 expression in pediatric acute lymphoblastic leukemia is associated with T-cell phenotype. *Oncogene* 1995; 11: 1333-8.
7. Ferrando AA, Neuberg DS, Staunton J, Loh ML, Huard C, Raimondi SC, et al. Gene expression signatures define novel oncogenic pathways in T cell acute lymphoblastic leukemia. *Cancer Cell* 2002; 1: 75-87.
8. Su XY, Della-Valle V, Andre-Schmutz I, Lemercier C, Radford-Weiss I, Ballerini P, et al. HOX11L2/TLX3 is transcriptionally activated through T-cell regulatory elements downstream of BCL11B as a result of the t(5;14)(q35;q32). *Blood* 2006; 108: 4198-201.

می‌باشد که شناسایی TLX3/HOX11L2 و TLX1/HOX11 و HPB-ALL Peer K562 بیان می‌شوند را تسهیل می‌کند. این تکنیک می‌تواند ابزار مهمی برای کامل کردن آنالیز سیتوژنتیک در غربالگری بیماران مبتلا به لوسیمی حاد باشد و از سوی دیگر می‌تواند یک روش سریع و کارآمد برای تعیین خصوصیات سلول‌های لوسیمیک باشد. اگرچه روش معمول کاریوتیپ یکی از مهم‌ترین ابزارها برای شناسایی ناهنجاری‌های کروموزومی در T-ALL است، با این وجود روشنی مشکل و وقت‌گیر بوده و labor intensive می‌باشد و در اغلب موارد منجر به نتایج منفی کاذب می‌شود.<sup>۱۲</sup> Multiplex RT-PCR Pallisgaard برای شناسایی ۲۹ جابه‌جاوی کروموزومی و ناهنجاری‌های کروموزومی شامل بیش از ۸۰ واریانت پیرایش با استفاده از هشت PCR موازی به کار برده‌اند.<sup>۱۳</sup> در مطالعه دیگری، روش Multiplex RT-PCR برای غربالگری ناهنجاری‌های ژنتیکی مانند MLL/AF4، MLL/ENL بهینه‌سازی شد. نتایج این آزمایشات پیشنهاد کردن که غربالگری مولکولی به اندازه سیتوژنتیک موفق بوده است.<sup>۱۴</sup> اخیراً یک مطالعه با استفاده از Nested multiplex RT-PCR برای شناسایی ۲۹ رونوشت ترکیبی در بیماران مبتلا به ALL انجام گرفته است. این مطالعه Nested ALL را برای ناهنجاری‌های ژنتیکی با استفاده از multiplex RT-PCR و تکنیک‌های سیتوژنتیک مورد بررسی قرار داده است. نتایج مبتنی بر این مطالعه نشان‌دهنده برخی ناهمخوانی‌ها بین یافته‌های متفاوت این روش‌های مختلف است. برخی نسخه‌های ترکیبی مخفی (پنج درصد) نمی‌توانند به وسیله کاریوتیپ شناسایی شوند.<sup>۱۵</sup> یکی از مهم‌ترین کاربردهای Multiplex RT-PCR به وسیله Henze توصیف شده است. آنها به صورت موفقیت‌آمیزی روش Multiplex RT-PCR را برای ۴۳۸ کودک مبتلا به ALL به کار برdenد.

9. Masson N, Greene WK, Rabbitts TH. Optimal activation of an endogenous gene by HOX11 requires the NH<sub>2</sub>-terminal 50 amino acids. *Mol Cell Biol* 1998; 18: 3502-8.
10. Alizadeh A, Eisen M, Botstein D, Brown PO, Staudt LM. Probing lymphocyte biology by genomic-scale gene expression analysis. *J Clin Immunol* 1998; 18: 373-9.
11. Goldberg JM, Silverman LB, Levy DE, Dalton VK, Gelber RD, Lehmann L, et al. Childhood T-cell acute lymphoblastic leukemia: the Dana-Farber Cancer Institute acute lymphoblastic leukemia consortium experience. *J Clin Oncol* 2003; 21: 3616-22.
12. Begley CG, Aplan PD, Denning SM, Haynes BF, Waldmann TA, Kirsch IR. The gene SCL is expressed during early hematopoiesis and encodes a differentiation-related DNA-binding motif. *Proc Natl Acad Sci USA* 1989; 86: 10128-32.
13. Pallisgaard N, Hokland P, Riishoj DC, Pedersen B, Jørgensen P. Multiplex reverse transcription-polymerase chain reaction for simultaneous screening of 29 translocations and chromosomal aberrations in acute leukemia. *Blood* 1998; 92: 574-88.
14. Elia L, Mancini M, Moleti L, Meloni G, Buffolino S, Krampera M, et al. A multiplex reverse transcriptase-polymerase chain reaction strategy for the diagnostic molecular screening of chimeric genes: a clinical evaluation on 170 patients with acute lymphoblastic leukemia. *Haematologica* 2003; 88: 275-9.
15. Meyer-Monard S, Parlier V, Passweg J, Mühlmattler D, Hess U, Bargetzi M, et al. Combination of broad molecular screening and cytogenetic analysis for genetic risk assignment and diagnosis in patients with acute leukemia. *Leukemia* 2006; 20: 247-53.
16. Seeger K, Taube T, Eckert C, Hanel C, Pogodda M, Henze G. Unusual T-cell receptor-delta gene rearrangement patterns revealed by screening of a large series of childhood acute lymphoblastic leukaemia by multiplex polymerase chain reaction. *Br J Haematol* 2001; 113: 318-22.

## Screening of prognostic factors using multiplex RT-PCR technique on different leukemic cell lines

Ahani R.  
Derakhshandeh Peykar P.  
Raoofian R.  
Heidari M.\*

Department of Medical Genetics,  
Faculty of Medicine, Tehran  
University of Medical Sciences

### Abstract

Received: August 11, 2008 Accepted: December 20, 2008

**Background:** Leukemia is one of the most common pediatric malignancies. T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL) accounts for 15% of hematopoietic cancers. It has been well understood that identification of genetic alterations associated with leukemias is very critical. The molecular genetic techniques have promoted the identification of leukemia-associated genetic changes that may characterize the most accurate predictors of clinical outcome. These considerations reinforce the requirement for rapid identification of the abnormalities.

**Methods:** Multiplex RT-PCR, a highly sensitive and specific method applied to screen simultaneously three most frequent transcription factors, *TLX1/HOX11*, *TLX3/HOX11L2* and *TAL1/SCL* which are associated with T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL).

**Results:** We describe here our efforts to establish a multiplex RT-PCR analysis system that facilitates the detection of these transcription factors which are specifically expressed in Peer, HPB-ALL and K562 cell lines, respectively.

**Conclusion:** The multiplex RT-PCR technique is a sensitive, valuable and cost-effective diagnostic tool which could improve our ability to accurately and rapidly risk-stratification of patients with childhood T-ALL. In order to perform multiplex RT-PCR technique researchers do not need bone marrow samples and they can employ this method using peripheral blood samples. Therefore, the status of treatment could be followed by assessment of the level of mRNA expression of oncogenic transcriptional factor using peripheral blood sample. Use of this procedure not only provides the best results in short term for specialist, but also clinicians could have opportunities to choose suitable treatment strategies with decrement of drug side effects.

**Keywords:** Multiplex RT-PCR, T-ALL, oncogene, leukemia, cell.

\* Corresponding author: Dept. of Medical Genetics, Tehran University of Medical Sciences, Poursina Ave., Ghods St., Keshavarz Blvd., Tehran, IRAN  
Tel: +98-21-88953005  
email: mheidari@sina.tums.ac.ir